

BRAINWAVE - Eye & Head Massager

Благодарим вас за покупку Merlin BrainWave - Eye & Head Massager. Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию перед использованием и держите ее для использования в будущем.

Introduction, scope and groups of application

Введение

Массажер обладает эргономичным дизайном и может быть настроен под любую форму и размер головы. Массажер воздействует вибрацией, давлением и температурой на специальные акупунктурные точки, расположенные на голове и глазах, чтобы помочь в насыщении кислородом мозга и глаз, улучшении их кровообращения мозга и глаз и устранения давления и усталости, что положительно влияет на самочувствие, сон и здоровье. При выполнении массажа, продукт позволяет вам наслаждаться музыкой.


Область применения

Вибромассаж головы и глаз, облегчающий напряженность мышц, устраняющий стресс и усталость, и улучшающий сон. Массаж поможет вам чувствовать себя свежим, стать спокойным и полностью расслабиться.

Комплектация

В комплект входит сам массажер, блок питания, руководство пользователя, наушники и сертификат соответствия.

Массажер

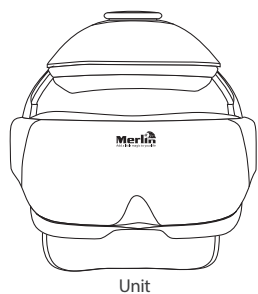

Unit

Комплектация




Сетевой адаптер

Наушники

Руководство

Управляющие элементы

Основной корпус

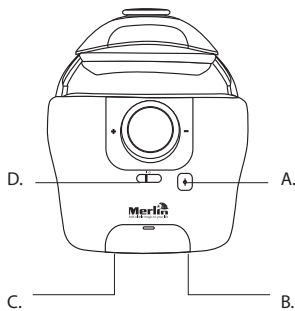

- A. Сброс давления C. Гнездо наушников
B. Гнездо питания D. Выключатель

Подготовка

1. Пожалуйста, проверьте целостность устройства и аксессуаров.
2. Зарядное устройство не должно быть повреждено.


Operation

Зарядка

1. Откройте гнездо питания в нижней части корпуса;
2. Вставьте круглый разъем постоянного тока адаптера питания в гнездо;
3. Во время зарядки индикатор адаптера начинает светиться красным светом, и зеленым при завершении зарядки.

Внимание:

1. Держите массажер в выключенном состоянии во время зарядки основного блока. Время полной зарядки составляет примерно 4 часа;
2. Если включить массажер во время зарядки, все функции продукта будут работать в нормальном режиме. Система автоматически прекратит зарядку.
3. Если напряжение батареи ниже, чем $3,2 \pm 0,1$ В, продукт автоматически отключится. Светодиодный индикатор будет мигать на главном блоке, все функции будут отключены. Пожалуйста, зарядите основной блок.

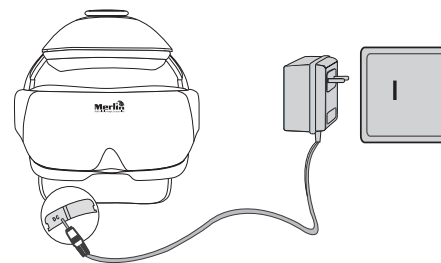

Как надевать

- Отрегулируйте верхнюю и обе боковые стороны и наденьте
1. основной блок на голову.
 2. В надетом состоянии можно продолжить регулировку для максимального комфорта.


Управление

Включение и выключение

Включение питания: Установите кнопку электропитания на основном блоке в положение «Ф».

Предустановленный массаж рассчитан на 15 мин и включает в себя давление воздуха + горячее давление + вибрация + фортепианная музыка.

Включение питания: Установите кнопку электропитания на основном блоке в положение «О».

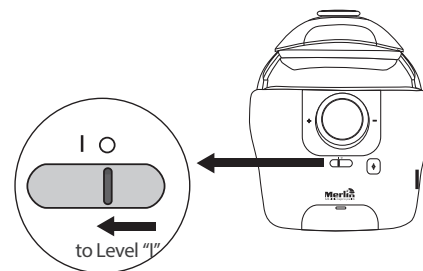

Решение проблем

Если есть какие-либо проблемы, когда вы используете устройство, пожалуйста, следуйте инструкциям ниже. Если проблема все еще существует или устройство не может работать нормально, пожалуйста, выключите питание и свяжитесь с сервис-центром. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Выключатель не в положении "F"	Переведите выключатель в положение "F"
	Батарея не заряжена	Зарядите устройство
Воздушное давление низкое	Уровень заряда батареи низкий	Зарядите устройство

Технические параметры

Питание	DC:4.5V 4.5W
Рабочие параметры	Темп. 5°C ~ 40°C Влажность ≤80%
	Атм. давление: 860hpa ~ 1060hpa
Размеры	282мм X 206мм X 254мм
Вес	1000г

Меры предосторожности

Please do read this User's Manual carefully for correct and safe use of this massager.

1. Использование массажера во время вождения запрещено.
2. Берегите массажер от высокой температуры и влажности.
3. Убедитесь, что на голове нет заколок, аксессуаров для волос и не надеты контактные линзы.
4. Не включите устройство до надевания массажера на голову, чтобы избежать повреждения вызванного более высоким давлением.
5. Это массажер рассчитан на взрослую голову с окружностью начиная с 56см ~ 64см.
6. Запрещается использовать этот продукт тем, у кого нездоровые симптомы головы и кто перенес операции на мозге.
7. Запрещается использовать этот продукт людям с аоплексией, гипертонией и гипотонией.
8. Запрещается использовать этот продукт людям с заболеваниями сердца и умственно отсталым людям.
9. Пожалуйста, используйте DC4.5V блок питания идущий в комплекте и храните его в безопасном месте.
10. Обязательно переведите выключатель в положение "O" после использования продукта.
11. Этот массажер является личным устройством и он не может заменить медицинских работников, если у вас есть вопросы касательно самочувствия, пожалуйста, проконсультируйтесь с профессионалами здравоохранения.
12. Массажер воздействует температурой, пользователи нечувствительные к температуре должны быть осторожны в использовании.